



EIN NEUER TAG BRICHT AN

Der neue ergonomisch geformte Corpus 3G wurde in Zusammenarbeit mit Bengt Engström (ursprünglicher Entwickler des Original Corpus® Sitzsystems) entwickelt und passt sich den natürlichen Konturen des Körpers an.


Die Einstellmöglichkeiten der Sitzbreite und Sitztiefe sind indexiert und deutlich gekennzeichnet. Der einstellbare Rücken besteht aus einer starken, geformten Aluminiumschale. Aufgrund seines Erscheinungsbilds lassen sich die nachrüstbaren Rückenlehnen problemlos anbringen. Für zusätzlichen Comfort, bietet das neue Sitzkissen verschiedene Einsätze für eine bessere Druckverteilung. Der leistungsstarke zentrale Motor ermöglicht eine Sitzkantelung bis 50° und bietet dem Nutzer eine Rückenlehnenverstellung bis zu 175°.

Basierend auf eine freitragende Konstruktion, haben die multifunktionale Armlehnen integrierte Kabelführungskanäle für einen geordneten Kabelverlauf unter den Armlehnen und reduzieren dadurch notwendige Kabelbinder. Die Beinstützen wurden ebenfalls neu konstruiert und bieten durch die natürliche Form eine bessere Unterstützung. Durch das Uni-Track-System kann zahlreiches Zubehör einfach und schnell an dem Stuhl befestigt werden.

CORPUS 3G



BEZUGSGARTEN

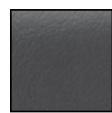

Kunstleder schwarz



Mesh schwarz



Mesh grau

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Der neue Corpus 3G ist stilvoll und schnittig und bietet dennoch denselben Komfort und das Gefühl wie sein Vorgängermodell.



Geteilte Rückenlehne in 25mm –Schritten einstellbar



50° Kantelung mit 2 Auswahlbereichen



175° elektrische Rückenlehnenverstellung



Hautschutz und Positionierungssysteme



Multifunktionale Armlehnen in einer freitragenden Konstruktion



Integriertes Kabelführungs-System



Natürlich geschwungene Beinstützen



Uni- Track-Schiene an der oberen Rückenlehne

SPEZIFIKATIONEN

	C400 - Corpus 3G	C500 - Corpus 3G
Gesamtgewicht mit Batterien	175 kg	180 kg
Länge	1130	1225
Breite	620	675
Geringste Transportlänge	900	930
Sitzhöhe zum Sitz	480	480
Sitzhöhe zum Kissen	550	550
Sitzbreite	420 - 570	420 - 570
Sitztiefe	370 - 570	370 - 570
Rückenlehnenhöhe	545 - 670	545 - 670
Armlehnenhöhe	230 - 330	230 - 330



The Power of Mobility

Permobil GmbH
 Zentrale Deutschland
 Alter Hellweg 36
 D-44379 Dortmund
 Tel 0231 945 36 30
 Fax 0231 945 363 70
 info@permobil.de

www.permobil.com